

Maymom® Slangonderdelen

Geschied voor Ameda Purely Yours Borstkolven



1. Toepasbare borstkolven: Ameda Purely Yours, MYA Joy, Joy Plus borstkolf. Ook voor Spectra pompen.
2. Certificaten: Dit product slaagt
 - A. EU-voedselveiligheidsrichtlijn 2008/39/EG (2002/72/EG);
 - B. Testen op siliconen van voedingskwaliteit;
 - C. EU BPA (Bisfenol A)-vrije test; EN 14350-2:2004 Clause 4.8.
3. Om te gebruiken, sluit u de slang **eenvoudig** aan op de witte dop slangconnector. **Steek de slang NIET te diep in de connector.** Het zal het verwijderen bemoeilijken.
Sluit het andere uiteinde van de slang aan op de T-vormige slangadapter van de borstkolf en zet de kolf aan.
4. Reinig en steriliseer de slang met waterstoom of kokend water gedurende 3-5 minuten.
minuten indien nodig. Om te drogen, sluit u de slang aan op de borstkolf en laat u het andere uiteinde (met de adapter) los. Zet de borstkolf aan totdat de slang is gedroogd.
5. **(Alleen voor A002)** Wanneer u de witte dop van de flens verwijderd, brengt u de kracht op de rand van de dop. **Oefen GEEN kracht uit op de slangconnector.**
Als u dit wel doet, is de kans groot dat de slangconnector kapotgaat.

Marketing: Maymom LLC, 3 Laurel Leaf Ct, Durham, NC 27703 VS

Vragen? Bel 919 4535168 of **e-mail** sales@maymom.com

Materiaal: Siliconen, PP; veilig tussen -20o C en 120o C

Modelnr./Batchnr.: A001/A002

Vervaldatum: 10 jaar vanaf de productiedatum

Gemaakt in Taiwan

Maymom streeft ernaar om producten van hoge kwaliteit te maken tegen een redelijke prijs. Onze Ameda-compatibele productlijn omvat kleppen, membranen, melkzakadapters, flessen, flensen en andere slangensets. Bezoek onze website (www.maymom.com) voor meer gerelateerde producten!




maymom® 
care for each mom

*Ameda en haar pompmodellen zijn geregistreerde handelsmerken van Ameda INC. Corp.

*SPECTRA en het SPECTRA-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA en Min Byung Wook DBA Uzinmedicare.

Maymom heeft geen enkele band met hen en onderschrijft de product- en compatibiliteitsclaims niet.



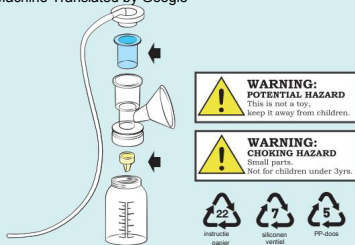

Modelnr.: A005-4D2U

Materiaal: puur siliconen

Hittebestendig: 120°C (250°F)


Houdbaarheid: 5 jaar (Beschermd tegen direct zonlicht)

Fabrikantdatum: 11 april 2024 Gemaakt in Taiwan

CS@maymom.com
+1 919 4535168
http://maymom.com/
Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703



Ameda is een geregistreerd handelsmerk van Ameda INC. Corp.
Maymom is niet gelieerd aan Ameda en Ameda onderschrijft het product ook niet.

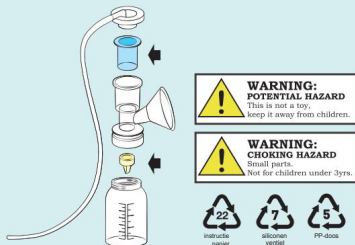

Modelnr.: A005-4D2U

Materiaal: puur siliconen

Hittebestendig: 120°C (250°F)

Houdbaarheid: 5 jaar (Beschermd tegen direct zonlicht)

Fabrikantdatum: 11 april 2024 Gemaakt in Taiwan

CS@maymom.com
+1 919 4535168
http://maymom.com/
Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703



Ameda is een geregistreerd handelsmerk van Ameda INC. Corp.
Maymom is niet gelieerd aan Ameda en Ameda onderschrijft het product ook niet.



Dubbelpak

Diafragma & Eendenbek

- Hygiënische opbergdoos
- Zacht en dun siliconen
- Herstel de zuigkracht
- BPA-vrij



Dubbelpak

Diafragma & Eendenbek

- Hygiënische opbergdoos
- Zacht en dun siliconen
- Herstel de zuigkracht
- BPA-vrij



SCHOON

Voor het eerste gebruik en na elk gebruik, wassen met heet water en een mild reinigingsmiddel en daarna schoonmaken. Steriliseren in kokend water gedurende 5 minuten en vervolgens volledig aan de lucht laten drogen.

GEbruIK

1. Zorg ervoor dat het diafragma/de eendenbek volledig 1 gedroogd, zodat er geen vocht in de slangen en de pomp kan komen.
2. Plaats het membraan/de eendenbek symmetrisch in de bovenste/onderste kamer van de flens.

Zie de pompinstructies voor de volledige 3. Gebruiks-, montage- en reinigingsinstructies.

4. Voor het verwijderen van de eendenbek: Wanneer u de eendenbek van de flens trekt, **Grijp NOOIT bij de opening.** Houd zo dicht mogelijk bij tot aan de basis van de klep. Op deze manier beschadigt u het kwetsbare gedeelte van de klep niet.

ZORG

Maak het membraan/de eendenbek schoon en laat het aan de lucht drogen. Wanneer u het niet gebruikt, bergt u het op in de opbergdoos.

Steek nooit een voorwerp in de eendenbekopening om deze schoon te maken. Dit kan het onderdeel scheuren of uitrekken, wat resulteert in slechte prestaties.

PROBLEEM OPLOSSEN

Als u lucht hoort lekken of verlies van zuigkracht voelt:

1. Plaats het membraan terug en doe de bovenklep. Als het probleem hiermee niet is opgelost, hebt u mogelijk een nieuwe bovenklep nodig.
2. Controleer of de eendenbek niet beschadigd of gescheurd is en er zijn geen buitenlandse pakketten tussen de twee lippen van de klep. Het is echter OK om een kleine opening te zien bij de yp wanneer de klep niet in gebruik is.

Als het membraan niet in zijn oorspronkelijke vorm terugkeert:

1. Waarschijnlijk is het membraan oud of is de siliconenklep in de pomp oud.
Vervang ze indien nodig.

SCHOON

Voor het eerste gebruik en na elk gebruik, wassen met heet water en een mild reinigingsmiddel en daarna schoonmaken. Steriliseren in kokend water gedurende 5 minuten en vervolgens volledig aan de lucht laten drogen.

GEbruIK

1. Zorg ervoor dat het membraan/de eendenbek volledig droog is, zodat er geen vocht in de slangen en de pomp kan komen.
2. Plaats het membraan/de eendenbek symmetrisch in de bovenste/onderste kamer van de flens.
3. Zie de pompinstructies voor volledige instructies voor gebruik, montage en reiniging.
4. Voor het verwijderen van de eendenbek: Wanneer u de eendenbek van de flens trekt, **Grijp NOOIT bij de opening.** Houd zo dicht mogelijk bij tot aan de basis van de klep. Op deze manier beschadigt u het kwetsbare gedeelte van de klep niet.

ZORG

Maak het membraan/de eendenbek schoon en laat het aan de lucht drogen. Wanneer u het niet gebruikt, bergt u het op in de opbergdoos.

Steek nooit een voorwerp in de eendenbekopening om deze schoon te maken. Dit kan het onderdeel scheuren of uitrekken, wat resulteert in slechte prestaties.

PROBLEEM OPLOSSEN

Als u lucht hoort lekken of verlies van zuigkracht voelt:

1. Plaats het membraan terug en doe de bovenklep. Als het probleem hiermee niet is opgelost, hebt u mogelijk een nieuwe bovenklep nodig.
2. Controleer of de eendenbek niet beschadigd of gescheurd is en er zijn geen buitenlandse pakketten tussen de twee lippen van de klep. Het is echter OK om een kleine opening te zien bij de yp wanneer de klep niet in gebruik is.

Als het membraan niet in zijn oorspronkelijke vorm terugkeert:

1. Waarschijnlijk is het membraan oud of is de siliconenklep in de pomp oud.
Vervang ze indien nodig.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409