


Installation

Tryck försiktigt och symmetriskt in ventilen på bröstskölden. Tryck **INTE** in den för hårt eftersom det kommer att göra borttagningen mycket svår. Men om den inte är tillräckligt tät kan det finnas luftläckage. Förlust av sugkraft kommer att inträffa.



**Rätta
Installation**

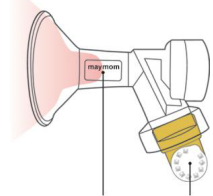

Logotyp och membrane är vända åt samma håll



Felaktig
Förlust av sug




Felaktig
Mjölk kan backa upp

Borttagning

Ta först bort membranet från ventilen (se TIPS nedan) och sedan:

- (A) Håll bröstskölden hårt med en av dina handflator
- (B) Vicka ventilen åt vänster och höger tills du känner att den är lös.
- (C) Vrid och vrid ventilen och dra av den.

TIPS: Att ta bort membranet genom att trycka ut det från insidan av ventilen istället för att dra av det från utsidan kan förlänga livslängden på det.

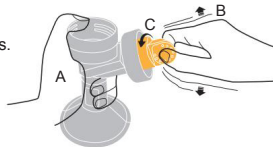

Korrekt orientering av kontrollmembranet



Användbar



Användbar även med ett litet mellanrum



Felaktig orientering för kontroll.
Ingen pumpar i denna position (ligger).

Membran & ventilvård



Låt **INTE** bröstmjölken torka ut mellan ventilen och bröstskyddet.
Torkad mjölk kan fungera som lim!



Handtvätt membranet noggrant. Dra eller sträck **INTE**.
Denna produkt är föremål för slitage. För optimal prestanda bör du byta ut en ny när du upptäcker slitna och trasiga membran.



Kundtjänst:

CS@maymom.com




Produktionsdatum:
7 JUL 2024

Storleksguide för bröstsköld


Bröstpumpning ska inte vara smärtsamt och obekvämt om du har rätt storlek på bröstskydd OCH rätt motoreffektinställning. Denna instruktion visar hur du väljer rätt storlek på bröstskölden. Beträffande sugeffekten, se din pumpmanual.

- 1 Mät din bröstvårts diameter (N) **EFTER** ett pumppass.
Du kan besöka www.maymom.com/nippleruler för en gratis nippellinjal.
- 2 Vi föreslår att du börjar prova en bröstskydd storlek (B) som är 1-2 mm större än din nippeldiameter. Om du mäter din bröstvårts diameter **INNAN** ett pumppass kan vi bara uppskatta att bröstsköldens storlek bör vara 2-5 mm större än din bröstvårts diameter.

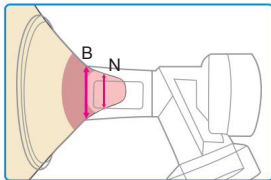

Rätt PASSFORM


Bröstvårtan rör sig lätt utan smärta.

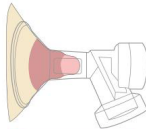

Bröstsköld är för stor

Bröstvårtan och överdriven vårtgården dras in i tunneln.


Prova en mindre storlek.

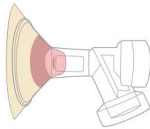

Bröstsköld är för liten

Bröstvårtan skaver längs sidan av tunneln och orsakar obehag.

Prova en större storlek.

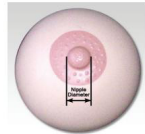

Bröstsköld är för kort

Bröstvårtan träffar tunneln.

Prova en längre eller mindre storlek.

- 3 Centrera bröstvårtan i tunneln på bröstskölden.
Börja nu pumpa och kontrollera följande punkter:

JA NEJ Fråga?		
		Rör sig din bröstvårta fritt i tunneln?
		Dras ingen eller endast mycket liten vävnad från vårtgården in i bröstsköldens tunnel?
		Känner du igen mjuka, rytmiska rörelser i bröstet vid varje pumpcykel?
		Känner du hur bröstet töms överallt?
		Är din bröstvårta fri från smärta?
		Finns det fortfarande utrymme mellan spetsen på din bröstvårta och änden av bröstvårtans tunnel under pumpning?

Alla svar ska vara **JA** och det indikerar att du har rätt storlek på bröstskölden och korrekt motorsugkraft. Om **INTE**, kontakta din amningskonsulent eller sluta använda Maymoms produkter för att förhindra ytterligare obehag.



Lämplig för utvalda Medela® bröstpumpar

Instruktioner



Före första användning:

Rengör ventilen med kokande vatten eller ånga i 3-5 minuter.

Tvätta membranet noggrant för hand.

Efter varje användning:

Rengör ventilen med varmt vatten och lufttorka sedan. Sterilisera den i kokande vatten eller ånga efter behov.

Tvätta membranet noggrant för hand.

Felsökning

När det inte finns något sug, kontrollera att membranet är korrekt installerat och att det inte finns några skräp eller främmande partiklar mellan membranet och ventilen. Även ett litet hår kommer att leda till förlust av sugkraft.



instruktionspapper



silikon
membran



PP
ventil & box



Mamma Ventiler & Membran

Lämplig för utvalda Medela bröstpumpar

Denna produkt uppfyller FDA-standarder för plast som kommer i kontakt med mat. Rapporter finns tillgängliga on

Specifikationer

Material: PP & silikon

Modell: M005

Hållbarhet: 10 år

Mfr Datum: 3 september 2024



Kundservice

Maymom, LLC

3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703



+1 919 4535168



CS@maymom.com



<http://maymom.com>

Tillverkad i Taiwan

*Medela är ett registrerat varumärke som tillhör Medela Holding AG, Schweiz.

Maymom är inte ansluten till Medela och dess produkter är inte heller godkända av Medela.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409