

Tubo per tiralatte Maymom®

Adatto per tiralatte Medela Swing

1. Per utilizzarlo, collegare l'estremità triangolare del tubo alla macchina e l'altra estremità alla coppa per il seno e accendere il tiralatte.

Assicurarsi che il bordo del connettore del tubo sia invisibile dopo l'inserimento nella pompa.

2. NON pulire il tubo utilizzando vapore o acqua bollente. Lavare con acqua fredda/tiepida. Per asciugare, collegare un'estremità del tubo al tiralatte e lasciare l'altra estremità scollegata.

Accendere il tiralatte finché il tubo non si è asciugato. Se è necessaria la sterilizzazione, utilizzare la sacca Micro-Steam di Medela e seguire attentamente le istruzioni oppure utilizzare metodi di sterilizzazione ad acqua fredda, ad esempio Milton.

3. In rari casi o dopo lunghi periodi di utilizzo, il tubo potrebbe staccarsi dal connettore.

Si prega di tagliare 0,3 cm dall'estremità del tubo, quindi reinserire il connettore nel tubo. Potresti non riuscire a spingere il connettore fino in fondo nel tubo, ma rimarrà sigillato.

Installazione del tubo Maymom su un tiralatte Swing Medela

- Spingere il connettore nella macchina finché il bordo del connettore non è più visibile.



Il bordo è ancora visibile. Si verificherà una perdita del 30% della potenza di aspirazione.

Il cerchio è completamente all'interno della macchina. **Installazione corretta!**

Certificazione

- A. Direttiva della Commissione sulla sicurezza alimentare nell'UE 2008/39/CE (2002/72/CE);
- B. Direttiva RoHS UE (Restriction of Hazardous Substances Directive) 2002/95/CE per l'ingresso del connettore materiale;
- C. Direttiva UE sui metalli pesanti EN71 Parte 3:1994 per tubi in PVC;
- D. Test UE privo di BPA (bisfenolo A); EN 14350-2:2004 Punto 4.8.

Produttore: Maymom Corp. Ltd.

20-7, Aly 19, LN333, ChungCheng Road. Zhunan, contea di Miaoli, Taiwan

<http://maymom.com>

Importato da Maymom LLC

3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703 Stati Uniti

Domande? Invia un'e-mail a CS@maymom.com Chiama +1 919 453168

Visita: <http://www.maymom.com/> per altri prodotti Maymom (membrane, valvole, coppe per il seno e adattatori per sacchetti del latte per tiralatte Swing!)

Materiale: PVC

Numero modello/numero lotto: M010-Swing/sulla confezione

Data di produzione: 12 luglio 2024

Scadenza: 10 anni dalla data di produzione

maymom®
care for each mom

*Medela e Swing sono marchi registrati di Medela Holding AG, Svizzera.
Maymom non è affiliata a Medela né Medela ne promuove il prodotto.





Grazie per aver scelto il kit tiralatte Maymom® per il tuo tiralatte Medela.

Maymom è la soluzione di alta qualità, sicura e conveniente per le tue esigenze di accessori per tiralatte.

Contenuto del Kit

Tubi, valvole gialle, membrane bianche, coppe per il seno MyFit™ monoblocco (taglie disponibili per l'acquisto: 15, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 34 e 36 mm)

Certificati

γ Registrato presso la FDA statunitense come dispositivo medico di classe II, kit tiralatte.

Numero di registrazione D192499.

γ Conforme ai requisiti FDA per i contenitori che entrano in contatto con gli alimenti (21 CFR 177.1520, 21 CFR 177.2600)

γ Senza BPA (EN 14350-2:2004 clausola 4.8.)



N. di registrazione D192499

Istruzioni per l'uso

Pulizia (solo per coppa per il seno, valvola gialla, membrana bianca; le istruzioni per la pulizia del tubicino sono riportate separatamente sulla confezione del tubicino):

Prima del primo utilizzo e una volta al giorno:

Smontare, pulire e sciacquare le parti in acqua calda. Far bollire le parti (coppa per il seno, valvola, membrana) in acqua bollente per 3-4 minuti.


Dopo ogni utilizzo:

Smontare, pulire e sciacquare le parti in acqua calda. Asciugare all'aria.

Installazione:

Spingere delicatamente e simmetricamente la valvola sulla coppa per il seno. **NON** spingerla troppo forte perché renderà la rimozione molto difficile. Tuttavia, se non è abbastanza stretta, potrebbe esserci una perdita d'aria, quindi si verificherà una perdita di potenza di aspirazione. Assicurarsi che la valvola sia posizionata lateralmente come indicato nell'immagine a destra per ridurre al minimo la possibilità che il latte rifluisca nel tubo.

Installazione

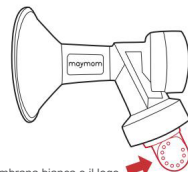


La membrana bianca e il logo sono rivolti nella stessa direzione.

Rimozione

Per prima cosa rimuovere la membrana dalla valvola, quindi:

- Tieni stretto lo scudo per il seno con uno dei palmi
- Muovi la valvola verso sinistra e verso destra finché non la senti allentata.
- Girare e svitare la valvola.

Rimozione

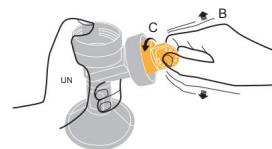

Nota: NON lasciare che il latte materno si secchi tra la valvola e la coppa per il seno.

Il latte in polvere può agire come colla!



Utilizzare con un reggiseno a mani libere (ad esempio Simple Wishes)

Visita <http://maymom.com/bra>

per una dimostrazione video

Servizio clienti Maymom

✉ CS@maymom.com

☎ +1 919 4535168

🌐 <http://maymom.com/>

📍 Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

Numero modello: M010-mFVMT

Codice UPC 738435627447

M010-S1

M012-mFVM

Il sacchetto di plastica non è un giocattolo.

Dopo l'apertura, gettare via.

Data di produzione:


15 aprile 2024

Installazione

Spingere delicatamente e simmetricamente la valvola sulla coppa per il seno. **NON** spingerla troppo forte perché renderà molto difficile la rimozione. Tuttavia, se non è abbastanza stretta, potrebbe esserci una perdita d'aria. Si verificherà una perdita di potenza di aspirazione.



**Corretto
Installazione**

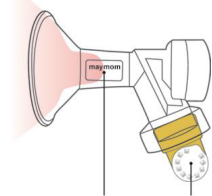

Il logo e la membrana sono
rivolti nella stessa direzione



Non corretto

Perdita di aspirazione



Non corretto


Il latte potrebbe accumularsi

Rimozione

Per prima cosa rimuovere la membrana dalla valvola (vedere il SUGGERIMENTO di seguito), quindi:

- (A) Tieni stretto lo scudo per il seno con uno dei palmi
- (B) Muovi la valvola a sinistra e a destra finché non senti che è allentata.
- (C) Girare e svitare la valvola.

SUGGERIMENTO: rimuovere la membrana spingendola fuori dall'interno della valvola anziché tirandola dall'esterno può prolungarne la durata.

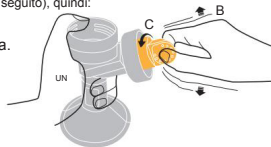


Orientamento corretto della membrana di controllo



Utilizzabile



Utilizzabile anche con un piccolo spazio

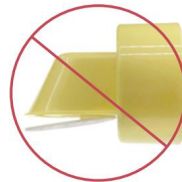

Orientamento errato per il controllo.
Nessuna pompa in questa posizione
(sdraiato).

Cura delle membrane e delle valvole



NON lasciare che il latte materno si secchi tra la valvola e la coppa per il seno.
Il latte in polvere può agire come colla!



Lavare a mano la membrana con cura. **NON** tirare o allungare.
Questo prodotto è soggetto a usura. Per prestazioni ottimali, dovresti sostituirne uno nuovo quando rilevi una membrana usurata e strappata.



leggi di
istruzioni



silicone
membrana



pp
valvola

Servizio clienti:

CS@maymom.com



Data di produzione:
7 LUGLIO 2024


Guida alla scelta della taglia della coppa per il seno

Tirare il latte non dovrebbe essere doloroso e scomodo se hai la coppa per il seno della misura corretta E la corretta impostazione della potenza del motore. Questa istruzione ti mostra come scegliere la misura corretta della coppa per il seno. Per quanto riguarda la potenza di aspirazione, fai riferimento al manuale del tuo tiralatte.

- 1** Misura il diametro del capezzolo (N) **DOPO** una sessione di estrazione.


Visitando il sito www.maymom.com/nipplerule è possibile ottenere gratuitamente un righello per capezzoli.

- 2** Ti consigliamo di iniziare a provare una taglia di scudo frangivento (B) di 1-2 mm più grande del diametro del capezzolo. Se misuri il diametro del capezzolo **PRIMA** di una sessione di estrazione, possiamo solo stimare che la dimensione della coppa per il seno dovrebbe essere 2-5 mm più grande del diametro del capezzolo.

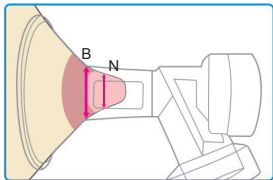

Corretto FIT


Il capezzolo si muove facilmente e non provoca alcun dolore.

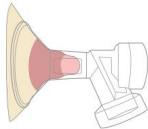

Scudo per il seno è troppo grande

Il capezzolo e l'areola in eccesso vengono tirati nel tunnel.


Prova una taglia più piccola.

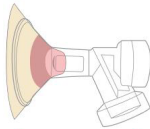

Scudo per il seno è troppo piccolo

Il capezzolo sfrega lungo il lato del tunnel e provoca fastidio.

Prova una taglia più grande.

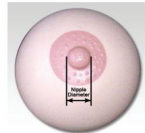

Scudo per il seno è troppo corto

Il capezzolo colpisce l'estremità del tunnel. Prova una taglia più lunga o più piccola.

- 3** Centrare il capezzolo nel tunnel della coppa per il seno.

Ora inizia a pompare e controlla i seguenti punti:

Sì	NO	Domanda?
		Il capezzolo si muove liberamente nel tunnel?
		Solo una piccola parte o niente del tessuto dell'areola viene tirato nel tunnel della coppa per il seno?
		Riconosci i movimenti delicati e ritmici del seno a ogni ciclo di estrazione?
		Senti che il seno si svuota completamente?
		Il tuo capezzolo non ti fa più male?
		Durante l'estrazione del latte, rimane ancora spazio tra la punta del capezzolo e l'estremità del condotto del capezzolo?

Tutte le risposte devono essere **Sì** e questo indica che hai la taglia corretta della coppa per il seno e la potenza di aspirazione del motore corretta. In caso contrario, consulta il tuo consulente per l'allattamento o interrompi l'uso dei prodotti Maymom per prevenire ulteriori disagi.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409