

Kompatibilität

Breit
Mund
Version



Teile vor der Sterilisation
zerlegen


Flaschenkompatibilität



Avent Classic Avent Naturspektren

Maimutter

Standard
Version

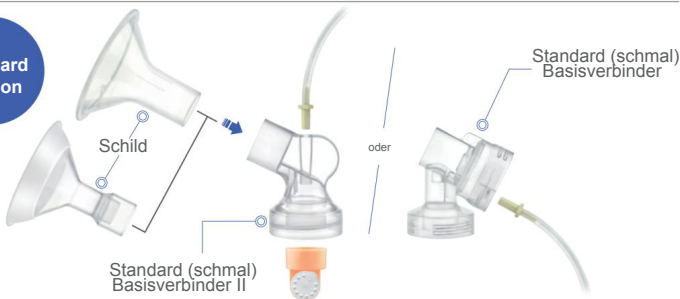

Flaschenkompatibilität



Lebensfabrik Ameda

Medela

Dr. Browns Maymom



maymom bottle
ASIN: B07JFG6K68



Zertifikate

- Bei der US-amerikanischen FDA als medizinisches Gerät der Klasse II registriert, Milchpumpen-Set. Registrierungsnummer D192499.
- Erfüllen Sie die FDA-Anforderungen für Behälter, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen (21 CFR 177.1520, 21 CFR 177.2600)
- BPA-frei (EN 14350-2:2004 Abschnitt 4.8.)

Fehlerbehebung (für Pano / Comfy Series Flange)

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie feststellen, dass der weiche Rand verformt ist. Dies liegt wahrscheinlich an einer längeren Kompression während des Transports. Tauchen Sie das Teil einfach 5 Minuten lang vollständig in kochendes Wasser und lassen Sie es dann mit dem gesamten weichen Rand nach unten auf einer flachen Oberfläche abkühlen. Es sollte seine normale Form wieder annehmen.

Reinigung

Vor der Reinigung ist die Abschirmung vom Sockelstecker zu lösen.

Vor dem ersten Gebrauch und einmal täglich:

- Alle Teile zerlegen, mit heißem Seifenwasser reinigen und sauber spülen.
- Kochen Sie die Teile 3 Minuten lang in kochendem Wasser.

Nach jedem Gebrauch:

- Die Teile auseinandernehmen, reinigen und in warmem Wasser abspülen. Vollständig an der Luft trocknen lassen.



Sorgen Sie dafür, dass sich ausreichend Wasser im Topf befindet.



Der Topfrand ohne Wasser wird überhitzt und der Kunststoff schmilzt.

Kundendienst

- ✉ CS@maymom.com
- 🌐 <http://maymom.com/>
- ☎ +1 919 4535168
- 📍 Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

Hergestellt in Taiwan

Produktinformationen

Modell	M012-(t)B / S012W-B / MP012 / SP012 / MP012F / MP012FP
Material	PP / PP+TPE Hitzebeständig 110 ° C (230 ° F)
Haltbarkeit	5 Jahre (vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt)
Herst.-Datum	12. Juni 2024



*Ameda ist eine eingetragene Marke von Ameda INC. Corp. Maymom ist weder mit Ameda verbunden, noch unterstützt Ameda das Produkt.
 *Avent ist eine eingetragene Marke von Philips NL. Maymom ist weder mit Philips verbunden, noch unterstützt Philips das Produkt.
 *Medela ist eine eingetragene Marke der Medela Holding AG, Schweiz. Maymom ist weder mit Medela verbunden, noch unterstützt Medela das Produkt.
 *Spectra ist eine eingetragene Marke der Uzinmedicare Co. Maymom ist weder mit Uzinmedicare verbunden, noch unterstützt Spectra das Produkt.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409