




Système de bride en 2 pièces

Compatibilité

Large
Bouche
Version

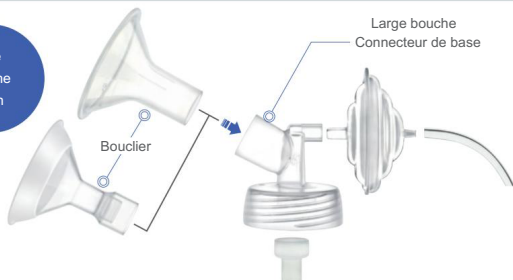

Démonter les pièces
avant la stérilisation


Compatibilité des bouteilles



Avent Classic Avent Natural Spectra

Maman de mai

Standard
Version

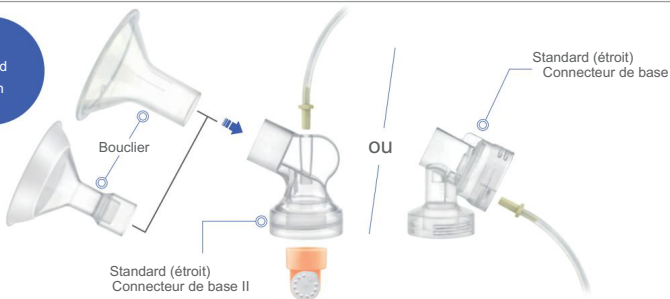

Compatibilité des bouteilles



Usine de vie Ameda

Medela

Maymom du Dr Brown



maymom bottle
ASIN: B07JFG6K68

Pompe compatible



Certificats

- Enregistré auprès de la FDA américaine en tant que dispositif médical de classe II, kit tire-lait.
Numéro d'enregistrement D192499.
- Conforme aux exigences de la FDA pour les conteneurs en contact avec les aliments
(21 CFR 177.1520, 21 CFR 177.2600)
- Sans BPA (EN 14350-2:2004 Clause 4.8.)

Dépannage (pour brides de la série Pano/Comfy)

Si vous constatez que le bord souple est déformé, ne vous inquiétez pas. Cela est probablement dû à une compression prolongée pendant le transport. Plongez simplement la pièce complètement dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes, puis laissez-la refroidir avec le bord souple entièrement tourné vers le bas sur une surface plane. Elle devrait reprendre sa forme normale.

Nettoyage

Avant le nettoyage, détachez le blindage du connecteur de base.

Avant la première utilisation, et une fois par jour :

- Démontez toutes les pièces, nettoyez à l'eau chaude savonneuse et rincer.
- Faire bouillir les pièces dans de l'eau bouillante pendant 3 minutes.

Après chaque utilisation :

- Démontez, nettoyez et rincer les pièces à l'eau tiède. Sécher complètement à l'air libre.



Assurez-vous d'avoir beaucoup d'eau dans le pot.



Le bord de la casserole sans eau surchauffera et cela fera fondre le plastique.

Service client

CS@maymom.com
http://maymom.com/
+1 919 4535168
Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

Fabriquée à Taiwan

Informations sur le produit

Modèle M012-(t)B / S012W-B / MP012 / SP012 / MP012F / MP012FP
Matériel PP / PP+TPE Résistant à la chaleur 110° C (230° F)
Durée de conservation 5 ans (à l'abri de la lumière directe du soleil)
Fabricant Date 6 août 2024

*Ameda est une marque déposée d'Ameda INC. Corp. Maymom n'est pas affiliée à Ameda et Ameda n'approuve pas le produit.
*Avent est une marque déposée de Philips NL. Maymom n'est pas affiliée à Philips et Philips n'approuve pas le produit.
*Medela est une marque déposée de Medela Holding AG, Suisse. Maymom n'est pas affiliée à Medela et Medela ne fait pas la promotion du produit.
*Spectra est une marque déposée de Uzinmedicare co. Maymom n'est pas affiliée à Uzinmedicare et Spectra n'approuve pas le produit.

