


# Kit flangia MyFit™

## Serie Cratere


### Più adatto per il seno a forma di ciotola

Non tutte le mamme hanno la stessa forma del seno. Gli scudi della serie Crater di Maymom sono creati per adattarsi meglio ai seni a forma di ciotola, soprattutto quando sono pieni. Una migliore vestibilità significa meno spazio vuoto tra l'areola e lo scudo, offrendo così un'estrazione più comoda ed efficiente.

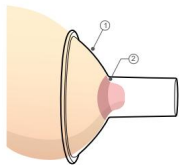

#### Cratere MyFit

- ① Vestibilità comoda senza punti di pressione e dolori
- ② Pompaggio efficiente grazie a una migliore tenuta e a meno vuoti spazio

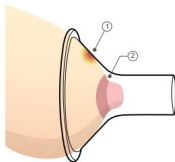

#### Altro scudo

- ① Dolori dovuti alla pressione e alla compressione sul seno
- ② Inefficienza dovuta a più spazio vuoto

### Compatibilità



### Reggisenò compatibile per l'estrazione

Essendo uno scudo separabile, questo prodotto è compatibile con quasi tutti i reggisenò per l'estrazione presenti sul mercato



Semplici desideri



medaglietta



SPADORATURA



Pompa e infermiera



Pacasso



Cinghia della pompa

### Pompa compatibile



Sinergia Oro



Sinergia Oro



S1



S2



9+

# Connettore compatibile

## Medela



adattività personale



Flettore



Figlio



Armonia



Altalena Maxi

## Altri



Lansinoh

Lansinoh  
ManualeMamma di Maggio  
StandardMamma di Maggio  
Bocca largaMamma di Maggio  
Standard

## Certificati

- Registrato presso la FDA statunitense come dispositivo medico di classe II, kit tiralatte. Reg. n. D192499.
- Conforme ai requisiti FDA per i contenitori che entrano in contatto con gli alimenti (21 CFR 177.1520, 21 CFR 177.2600)
- Senza BPA (EN 14350-2:2004 clausola 4.8.)



## Pulizia

**Prima di procedere alla pulizia, staccare la schermatura dal connettore di base.**

### Prima del primo utilizzo e una volta al giorno:

- Smontare tutti i pezzi, pulirli con acqua calda e sapone e risciacquare.
- Far bollire i pezzi in acqua bollente per 3 minuti.

### Dopo ogni utilizzo:

- Smontare, pulire e sciacquare le parti in acqua calda.

Lasciare asciugare completamente all'aria.

**Lavabile in lavastoviglie SOLO nel cestello superiore.**



**Smontare le parti  
prima della sterilizzazione**

## Assistenza clienti

✉ CS@maymom.com  
🌐 <http://maymom.com/>  
☎ +1 919 4535168  
📍 Maggimom LLC  
3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703

## Informazioni sul prodotto

**Modello** MP012C, S012W.BC-F\*\*Dx2

**Materiale** Polipropilene

**Resistente al calore** 110 ° C (230 ° F)

**Durata di conservazione** 5 anni (Lontano dalla luce solare diretta)

**Data produttore** 1 agosto 2024

