


Zestaw kołnierzy MyFitTM

Seria kraterów


Lepsze dopasowanie do piersi w kształcie miseczki

Nie każda matka ma taki sam kształt piersi. Osłonki Maymom Crater Series Shields zostały stworzone, aby lepiej dopasować się do piersi w kształcie miseczki, zwłaszcza gdy są pełne. Lepsze dopasowanie oznacza mniej pustej przestrzeni między otoczką a osłonką, co zapewnia wygodniejsze i skuteczniejsze pompowanie.

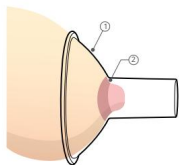

Krater MyFit

- ① Wygodne dopasowanie bez punktów ucisku i bólu
- ② Wydajniejsze pompowanie dzięki lepszemu uszczelnieniu i mniejszej ilości pustych przestrzeni

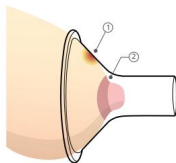

Inna tarcza

- ① Bóle spowodowane uciskiem i ściskaniem piersi
- ② Niefektywność z powodu większej przestrzeni pustej

Zgodność



Kompatybilny biustonosz do pompowania

Jako że jest to oddzielna tarcza, produkt ten jest kompatybilny z niemal wszystkimi biustonoszami do odciągania pokarmu dostępnymi na rynku



Proste życzenia



Medela



ZUCHWAŁOŚĆ



Pompa i Pielęgniarka



Pacasso



Pasek do pompy

Kompatybilna pompa



Synergia złota



Synergia złota



S1



S2



9+

Medela



dopasowanie osobiste



Przewód



Syn



Harmonia



Huśtawka Maxi

Inni



Lansino



Lansino
Podręcznik



Majowa mama
Standard



Majowa mama
Szerokie usta



Majowa mama
Standard

Certyfikaty

- Zarejestrowany w US FDA jako wyrób medyczny klasy II, zestaw do odciągania pokarmu. Nr rej. D192499.
- Spełnij wymagania FDA dotyczące pojemników mających kontakt z żywnością (21 CFR 177.1520, 21 CFR 177.2600) 
- Nie zawiera BPA (EN 14350-2:2004, punkt 4.8.)

Czyszczenie

Przed czyszczeniem należy odłączyć osłonę od złącza bazowego.

Przed pierwszym użyciem i raz dziennie:

- Rozłóż wszystkie części, umyj je gorącą wodą z mydłem i wypłucz.
- Gotuj części we wrzącej wodzie przez 3 minuty.

Po każdym użyciu:

- Rozłóż, wyczyść i opłucz części ciepłą wodą.

Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na powietrzu.

Można myć w zmywarce TYLKO na górnym poziomie.



Rozłóż części
przed sterylizacją

Obsługa klienta

✉ CS@maymom.com
🌐 <http://maymom.com/>
☎ +1 919 4535168
📍 Maymom LLC
3 Laurel Leaf CT, Durham, Karolina Północna 27703

Informacje o produkcie

Model **MP012C, S012W.BC-F**Dx2**
Tworzywo Polipropylen
Odporny na ciepło 110oC (230oF)
Ochrona przed promieniami UV 5 lat (z dala od bezpośredniego światła słonecznego)
Data produkcji 1 sierpnia 2024 r.



*Lansinoh jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Lansinoh Laboratories, Inc. Maymom nie jest powiązana z firmą Lansinoh, ani Lansinoh nie popiera tego produktu.

**Medela jest zarejestrowanym znakiem towarowym Medela Holding AG, Szwajcaria. Maymom nie jest powiązana z Medela, ani Medela nie popiera tego produktu.