

Maymom, LLC

3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

✉ CS@maymom.com

☎ +1 919 4535168

🏠 http://maymom.com

Tillverkad i Taiwan

Produktinformation

Modell **XP024-2M.w**

Material Ren silikon

Värmebeständig 120o C (250o F)

Hållbarhet 5 år (Från direkt solljus)

Mfr. Datum 19 AUGUSTI 2024



EH XP024-2M.w

EAN 4713530091146

IX001WGKBFL)Î

X001WGKBFL

Maymom Silicone Memb... eller Spectra Pump Part
NYHET**WARNING:
POTENTIAL HAZARD**This is not a toy,
keep it away from children.**WARNING:
CHOKING HAZARD**Small parts.
Not for children under 3yrs.

*SPECTRA och SPECTRA-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA och Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom är inte ansluten till dem och de stöder inte heller produkt- och kompatibilitetsanspråken.

maymom®
care for each mom

Silikonmembran

lämplig för speCtra-backflow-skydd

- Ren silikon
- Återställ sugkraften




Mfr. Datum 3 JUL 2024

Installation

1. Sätt in det inre höljet i silikonmembranet och sätt sedan in aggregatet i det yttre höljet för att bilda backflow-skyddet (BP).
2. Membranet är bara en del av hela Backflow-skyddet.

Du behöver också andra delar t.ex. yttre, inre hölje för att det ska fungera.

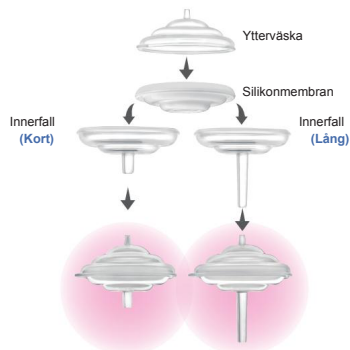

Kompatibilitet



- Detta membran passar Spectras nya typ av återflödesskydd.
- Den KAN INTE användas med spectra gammal typ (se bilder ovan).
- Den passar även Maymom långa och korta skaftbackflowskydd.

Rena

1. Innan du använder dem för första gången, koka delarna i vatten i 5 minuter.
2. Efter varje användning, rengör i varmt tvålatten, skölj rent och lufttorka sedan.
3. Efter varje användning, ta loss, handtvätt och torr membran så snart som möjligt för att undvika mögeltillväxt.

Lämplig för spectra S1/S2/9 &
Philips AVENT komfortbröstpumpar

Instruktioner

Före första användning:

Rengör ventilen i kokande vatten eller ånga i 3-5 minuter.



Efter varje användning:

Rengör den med varmt vatten och lufttorka sedan.
Sterilisera den i kokande vatten eller ånga efter behov.

Installation: Se bilder nedan



Spectra



Philips Avent

borttagning:

När du drar ventilen från flänsen, **ta ALDRIG tag i dess mittöppning.**

Dra av den vid sidoskaftet. På så sätt kommer du inte att skada det ömtåliga området på ventilen.

Rengöring:

För aldrig in något föremål i ventilöppningen för att rengöra den. Detta kan slita sönder eller töja delen vilket resulterar i dålig prestanda.



Felsökning

När det inte finns något sug, kontrollera att spetsen på ventilen inte är skadad eller trasig och att det inte finns något skräp eller främmande partiklar mellan ventilens två läppar.

Även ett litet hår kommer att leda till förlust av sugkraft. Det är dock OK att se en liten öppning ($<0,4$ mm) i spetsen när den inte används.

Denna produkt uppfyller FDA-standarder för plast som kommer i kontakt med mat.
Rapporter finns tillgängliga online.

Specifikationer

Material: Silikon (-150 F - 2500 F)

Modell: P005.2G

Hållbarhet: 10 år

Mfr Datum: 12 september 2024



Tillverkad i Taiwan

Kundservice

Maymom, LLC 3

Laurel Leaf CT Durham, NC 27703 +1 919



4535168



CS@maymom.com



<http://maymom.com/>



WARNING:

CHOKING HAZARD

Small parts.

Not for children under 3yrs.



WARNING:

POTENTIAL HAZARD

This is not a toy,

keep it away from children.



silikon

*Avent är ett registrerat varumärke som tillhör Philips NL.

Maymom är inte ansluten till Philips och Philips rekommenderar inte heller produkten.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409