

Slangen voor speCtra

ÿPast op speCtra S1/S2 pompen

ÿ100% compatibiliteit

ÿBPA- en DEHP-vrij

ÿ42 inch lang

Materiaal	Siliconen
Hittebestendig	-10 - 120°C (15-250°F)
Houdbaarheid	10 jaar (Beschermd tegen direct zonlicht)
Modelnr.	S001.55-105SII



Gebruiksaanwijzing

Schoon

De slang is niet steriel, maar wel schoon. U kunt hem gebruiken zoals hij is. Melk komt niet in contact met de slang.

Sterilisatie is niet nodig. Als de slang vies wordt, gebruik dan een vochtige handdoek om het stof eraf te vegen.

Gebruik

- (A) Sluit het ene uiteinde van de slang aan op de pomp en het andere uiteinde op het kleine uiteinde van de terugslagklep.
- (B) Als het uiteinde van de slang losraakt na een periode van gebruik, snijd dan ongeveer 1/8 inch van het uiteinde af. Het zal weer als nieuw zijn.

Probleemoplossing

Lage zuigkracht –

Er zijn veel factoren die kunnen leiden tot een lage zuigkracht.

Controleer of

- ÿde eendenbek (of het kleine witte membraan) moet worden vervangen;
- ÿde gele klep (indien u de Medela of Maymom flens gebruikt) is geïnstalleerd volgens de bijbehorende instructies;
- ÿer een scheur in het hele systeem zit;
- ÿhet witte membraan van de terugslagklep beweegt vrij heen en weer;
- ÿer schade is aan de slangen (huisdieren kauwen graag op de slangen);
- ÿHet uiteinde van de slang zit los.

Zorg

ÿDe slang is geen speelgoed. Houd de slang uit de buurt van kinderen en huisdieren.

ÿLaat het product niet voor langere tijd in de auto liggen.

Extreme weersomstandigheden kunnen de slangen beschadigen.

ÿGebruik geen UV-straling of stoom om de onderdelen te steriliseren.

(A)



Niet gebruiken Niet gebruiken UV
stoomzak



Vorkom
dat huisdieren kauwen



Maymom Klantenservice

CS@maymom.com
+1 919 4535168

http://maymom.com/

Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

Terugslagklep



Productassemblage
Video

Compatibele pomp




spectra 9+



spectra S2

spectra S1

Flensverbinding

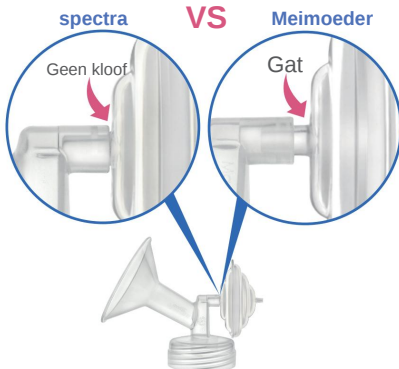

De opening is geen defect. Maymom flensconnector is dubbel functioneel.


Het wordt

1. Spectra terugslagklep
2. Medela pomp in stijl slang

Installatie en verwijdering



DRAAI de terugslagklep om deze in/uit de flens te plaatsen/verwijderen

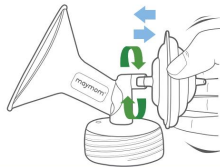

Trek/duw **NIET** met kracht

Duw het NIET helemaal naar binnen. Het is geen defect als er een opening is tussen de Maymom-flens en de beschermer.



Schoonmaak

Voor het eerste gebruik en eenmaal daags:

- Haal alle onderdelen uit elkaar, maak ze schoon met warm zeepsop en spoel ze daarna af.
- Kook de onderdelen 3 minuten in kokend water.



Zorg ervoor dat er voldoende water in de pan zit.



De rand van de pan zonder water raakt oververhit en het plastic smelt.

Na elk gebruik:


- Demonteer, reinig en spoel de onderdelen in warm water. Laat ze volledig aan de lucht drogen.

Magnetronbestendig

Geschikt voor de bovenste lade van de vaatwasser


Montage

- Plaats het siliconen membraan in de binnenbehuizing.
Zorg ervoor dat het stevig om de rand past
- Plaats de buitenbehuizing op het membraan.
- Druk op de rand van het siliconenmembraan zodat het gelijk ligt met zowel de buiten- als de binnenbehuizing.

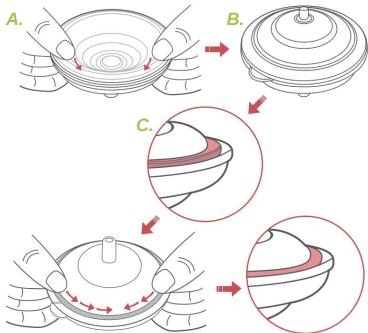

Demontage


- Houd de binnenbehuizing met één hand vast.
- Trek aan de **OPEN**- knoop op de buitenbehuizing om de twee delen van elkaar te scheiden.

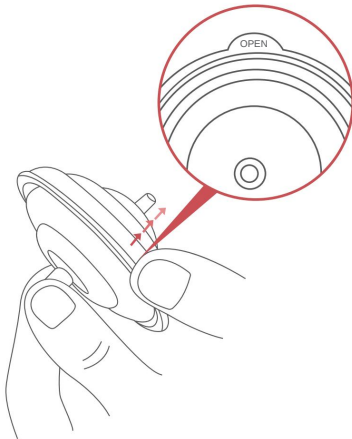


Verwijderen van slangen



Beweeg de slang heen en weer om hem te verwijderen.
(Behoud langere levensduur)

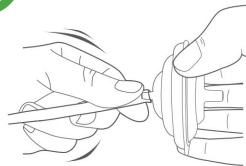

Trek **NIET** om de slang te verwijderen

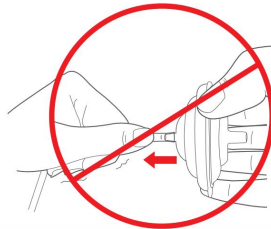

Klantenservice



CS@maymom.com



<http://maymom.com/>



+1 919 4535168



Maymom, LLC
3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

maymom
care for each mom

Gemaakt in Taiwan

Productinformatie

Model **X024-2sBfp**

Materiaal Polypropyleen (PP), siliconen

Hittebestendig 110OC (230OF)

Houdbaarheid 5 jaar (Beschermd tegen direct zonlicht)


Fabrikantdatum 8 mei 2024



*Medela is een geregistreerd handelsmerk van Medela Holding AG, Zwitserland. Maymom is niet gelieerd aan Medela en Medela onderschrijft het product en de compatibiliteitsclaims niet.
*SPECTRA en het SPECTRA-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA en Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom is niet aan hen gelieerd en onderschrijft ook niet de product- en compatibiliteitsclaims.


Eendenbekpop/afleverpunt?

Zorg ervoor dat de twee roze gebieden **GEEN** melkresten bevatten en droog zijn voordat u ze installeert, om te voorkomen dat ze loskomen. (Zie instructies voor details)

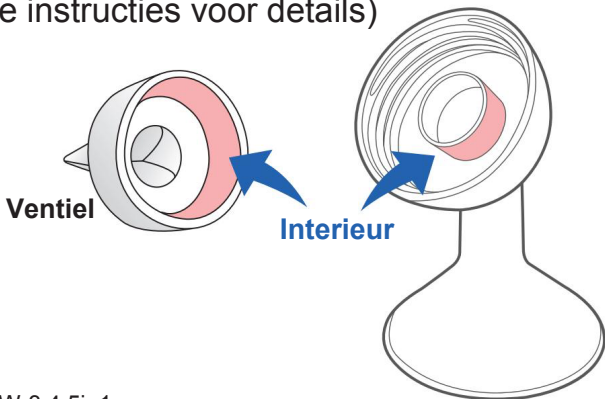


S001W-3.4.5in1

Voorzichtigheid!!!

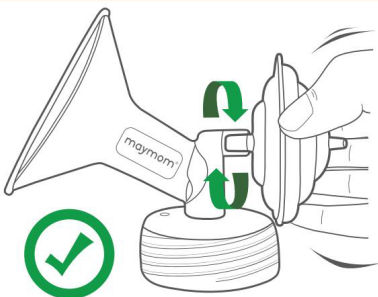

DRAAI

om de terugslagklep in/uit de flens te plaatsen/verwijderen.

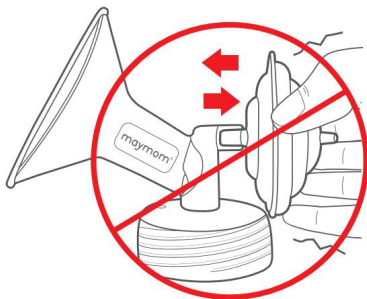

NIET DOEN

rock, duw in/trek met kracht. Er zal een scheur ontstaan.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly. 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409