


Valve à bec de canard

Convient aux tétérèlles larges/
standard, Medela, Hygeia, Spectra,
Freemie Open System Retired et aux
tétérèlles Maymom

Informations sur le bec de canard

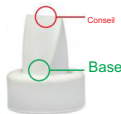

- Après la séance de pompage, les extrémités de la valve à bec de canard peuvent s'ouvrir légèrement. Cependant, l'ouverture se fermera progressivement. Ce n'est pas un défaut car la valve est en matériau élastique.
- Lors du pompage, les embouts s'ouvrent pour permettre l'écoulement du lait. Lorsque vous arrêtez de pomper, les embouts ne sont pas étirés et l'ouverture se referme après un certain temps.
- Il est normal de voir une petite ouverture à l'extrémité lorsque la valve n'est pas utilisée.
- Ce produit est sujet à l'usure. Pour des performances optimales, si vos embouts en bec de canard ne sont pas utilisés mais présentent un écart supérieur à 0,5 mm, vous devez les remplacer par des neufs.

Service client

Maymom LLC
3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703

✉ CS@maymom.com
☎ +1 919 4535168
🏠 <http://maymom.com>

Fabriqu      Taiwan

Informations sur le produit

Mod  le S005-6D. H005-4fD. X117-4Rr2fD. X029W-2Mba2fD
Mat  riel Silicone pur
R  sistant    la chaleur 120  C (250  F)
Dur  e de conservation 5 ans (   l'abri de la lumi  re directe du soleil)
Fabricant Date 19 AO  T 2024



*SPECTRA et le logo SPECTRA sont des marques d  pos  es de Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA et Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom n'est pas affili  e    ils n'approuvent pas non plus les all  gations relatives au produit et    la compatibilit  .

*Medela est une marque d  pos  e de Medela Holding AG, Suisse. Maymom n'est pas affili  e    Medela et Medela n'approuve pas le produit ni les all  gations de compatibilit  .

*Freemie est une marque d  pos  e de Dao Health. Maymom n'est pas affili  e    Dao Health et Dao Health n'approuve pas le produit ni les all  gations de compatibilit  .

*Hygeia est une marque d  pos  e de Hygeia Inc. Maymom n'est pas affili  e    Hygeia.



Petite partie   touff  e



  limination du bec de canard



silicone
souple

Fonctionnalit   de conception de Maymom



Nous avons con  u les embouts du bec de canard de mani  re    ce qu'ils aient une   paisseur diff  rente    la base et    la pointe. Une base plus   paisse assure la durabilit   lors de l'installation et du retrait. Une pointe plus fine permet un meilleur d  bit de lait et une meilleure aspiration pendant le pompage.

Utiliser

Installation

(UN) Fixer **sym  triquement** la valve sur la bride.

(B) Si vous voyez un grand espace ouvert, appuyez autour du bord de la valve jusqu'   ce que l'espace soit inf  rieur    0,5 mm.

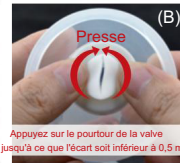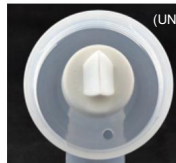

Appuyez sur le pourtour de la valve jusqu'   ce que l'  cart soit inf  rieur    0,5 mm.

Suppression

- (C) Tenez les deux c  t  s plats du bec de canard **pr  s de la base** et tirez lat  ralement.
- (D) **NE PAS tirer sur les pointes fines**





Spectra
large/standard
cou



Medela
harmonie



Medela
Maman de mai
Hygie



Gratuit
Base de soupape
(Systeme ouvert retire)



Personalfit
Connecteur




Maymom
grande bouche
Connecteur

Q1. Dépose/dépose de bec de canard ?

La graisse du lait maternel rendra le bec de canard et l'intérieur de la bride glissants et se détacheront. Après chaque utilisation, assurez-vous de laver les becs de canard et

Nettoyez les brides avec de l'eau chaude savonneuse et séchez-les. Si nécessaire, du vinaigre de cuisine aidera à dissoudre la graisse.

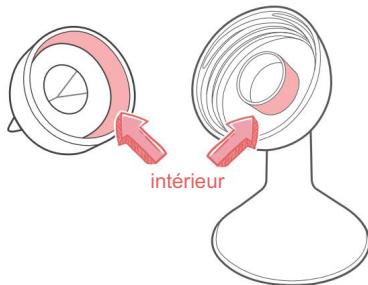

Q2. Faible aspiration ?


Vérifiez que l'extrémité du bec de canard ne présente aucune usure. Remplacez-la si nécessaire.

Vérifiez qu'il n'y a pas de résidus de lait entre les extrémités intérieures des becs de canard.



Q3. Espace entre les lèvres ?

Il n'y a pas de défaut lorsqu'on voit un petit espace entre les lèvres de la valve. Lorsque la pompe génère une aspiration, l'espace se referme et les valves fonctionnent correctement.

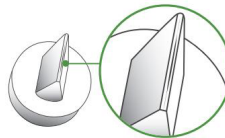


Petit écart.

Aucune perte d'aspiration.

PAS de nettoyage au lave-vaisselle.

- Avant la première utilisation, désinfecter dans de l'eau bouillante pendant 3 min ou dans de la vapeur d'eau pendant 15 min.
- Après chaque utilisation, lavez délicatement les valves à la main dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez pendant 10 à 15 secondes.
- Après chaque utilisation, détachez, lavez à la main et séchez les valves dès que possible pour éviter la formation de moisissures.

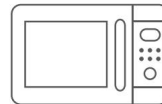

Compatible avec le micro-ondes




Assurez-vous d'avoir beaucoup d'eau dans le pot.



Le bord de la casserole sans eau surchauffera et cela fera fondre le plastique.


Bec de canard Pop/Drop Off ?

Assurez-vous que les deux zones roses n'ont AUCUN résidu de lait et sont sèches avant l'installation pour éviter qu'elles ne se détachent.
(Voir les instructions pour plus de détails)

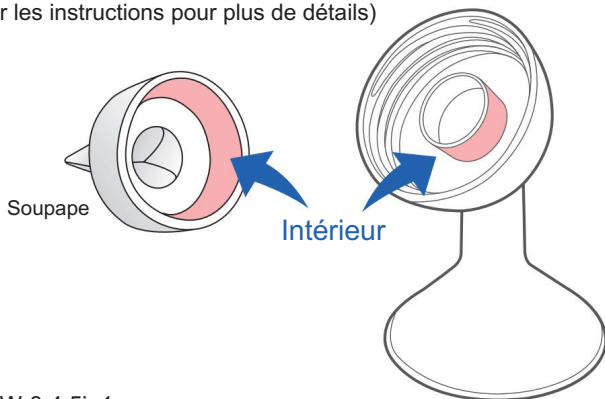


S001W-3.4.5in1

Prudence!!!

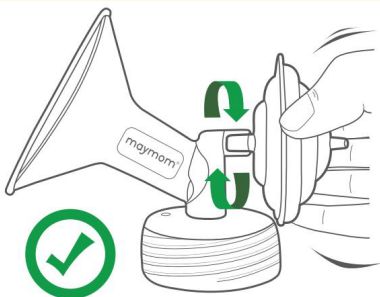

TOURNER

pour insérer/retirer le dispositif anti-retour dans/hors de la bride.

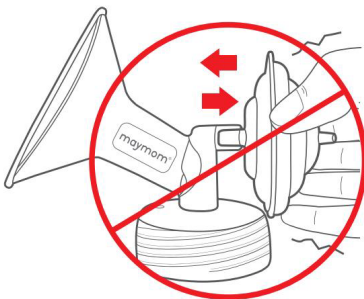

NE PAS

Rocher, pousser/tirer avec force. Une fissure se produira.