



Model: S012W-F**[VM]

Maymom-flens

Voor speCtra S1/S2 pompen



BPA
FREE



Optioneel



Optioneel

Inhoud kan afwijken van de afbeelding

Materiaal	PP, Siliconen
Hittebestendig	-10°C-110°C (15°F-230°F)
Houdbaarheid	10 jaar (Beschermd tegen direct zonlicht)
Fabrikant Datum	7 augustus 2024

Certificering

yGeregistreerd bij de Amerikaanse FDA als medisch hulpmiddel klasse II, borstkolfset. Registratienummer D192499.



yBPA-vrij (EN 14350-2:2004 clause 4.8.)

Dubbele functiepoort van Maymom-flens

De ruimte tussen de flens en de terugslagklep is normaal, aangezien sommige partijen Maymom-flensen zijn ontworpen om te werken met zowel de Spectra-terugslagklep als de pompslangen van Medela.



Compatibele terugslagklep



Meimoeeder



Amazon Walmart



Mya / Motief / Cimilre
Meimoeeder



amazone Walmart-winkel



Spectra
Meimoeeder



Amazon Walmart

Compatibele fles



Avent Natuurlijk
PP

Avent Klassiek
PP

Avent glas

speCtra
brede mond
(S1/S2)

Compatibele klep



Medela
Ventiel/
Membraan



amazon walmart amazon walmart amazon walmart



Meimoeeder
Ventiel/
Membraan



Meimoeeder
2e generatie
Eendenbekventiel



Spectra
Meimoeeder
Eendenbekventiel



Schoonmaak

Voor het eerste gebruik en eenmaal daags:

Demonteer, reinig met zeepsop en spoel af in warm water. Kook de onderdelen (borstschild, klep) 3-4 minuten in kokend water. Behandel het membraan voorzichtig.



Zorg ervoor dat er voldoende water in de pan zit.



De rand van de pan zonder water wordt oververhit en het plastic smelt.

Na elk gebruik:

Demonteer, reinig en spoel de onderdelen in warm water. Laat ze aan de lucht drogen.

Vaatwasserbestendig BOVENREK. Magnetronbestendig.

Probleemoplossing


Geen zuigkracht –

- yZorg ervoor dat de eendenbek/klep/membraan op zijn plaats zit (veel nieuwe moeders vergeten dit!)
- yEen scheur in de flens.
- yHet membraan in de terugslagklep kan vrij bewegen.

Lage zuigkracht –

- yControleer of de eendenbek/het membraan niet gescheurd is
- yWanneer u overschakelt naar een kleinere flens, zult u VOELEN dat de zuigkracht lager is, omdat er minder van uw tepelhof wordt afgezogen. Zet indien nodig het vermogen van de motor hoger.


Duw de klep voorzichtig en symmetrisch op het borstschild.
Duw het **NIET** te hard, want dan wordt het verwijderen ervan lastiger.
Als de afdichting echter niet strak genoeg zit, kan er lucht ontsnappen.
Er zal sprake zijn van verlies van zuigkracht.

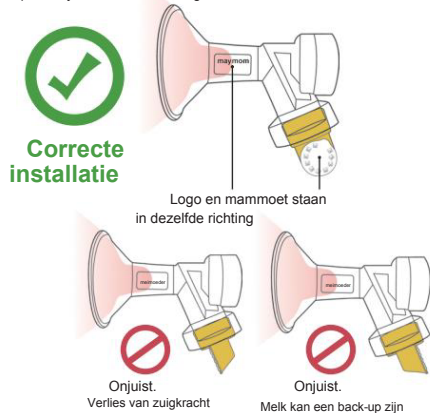

Verwijdering


Verwijder eerst het membraan van de klep (zie TIP hieronder) en doe dan het volgende:

- Houd het borstschild stevig vast met een van uw handpalmen
- Beweeg de klep naar links en rechts totdat u voelt dat deze los zit.
- Draai de klep en trek hem eraf.

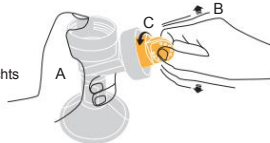

TIP: Als u het membraan verwijdert door het van binnenuit de klep naar buiten te duwen in plaats van het van buitenaf te trekken, kunt u de levensduur ervan verlengen.

Juiste oriëntatie van het controlemembraan

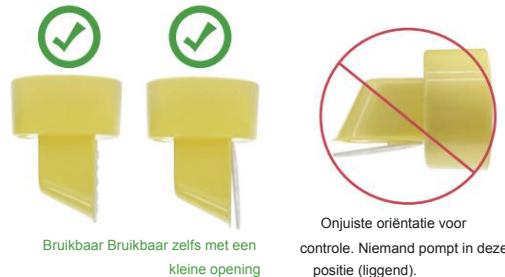


Membraan- en klepverzorging


- Laat de moedermelk **NIET** opdrogen tussen de klep en het borstschild. Opgedroogde melk kan als lijm werken!
- Was het membraan voorzichtig met de hand. **NIET** trekken of uitrekken.
- Dit product is onderhevig aan slijtage. Voor optimale prestaties moet u een nieuw product vervangen wanneer u versleten en gescheurde membranen detecteert.

Gids voor het selecteren van de maat van het borstschild

Borstkolven hoeft niet pijnlijk en oncomfortabel te zijn als u de juiste maat borstschild EN de juiste motorvermogensinstelling hebt. Deze instructie laat zien hoe u de juiste maat borstschild kiest. Wat betreft de zuigkracht, raadpleeg de handleiding van uw kolf.

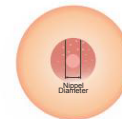

- Meet de diameter van uw tepel (N) **NA** een kolfsessie. U kunt www.maymom.com/nippleruler bezoeken voor een gratis tepellinaal.
- Wij raden u aan om te beginnen met het proberen van een borstschild maat (B) dat 1-2 mm groter dan de diameter van uw tepel. Als u de diameter van uw tepel meet **VOOR** een kolfsessie, kunnen we alleen schatten dat de grootte van het borstschild 2-5 mm groter moet zijn dan de diameter van uw tepel.

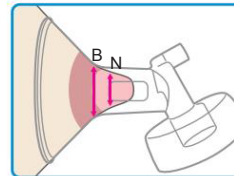

Juiste FIT

De tepel kan gemakkelijk en zonder pijn worden bewogen.



De tepel en de overvloedige tepelhof worden in de tunnel getrokken. Probeer een kleinere maat.

De tepel schuurt langs de zijkant van de tunnel en veroorzaakt ongemak. Probeer een grotere maat.

De tepel raakt het uiteinde van de tunnel. Probeer een langere of kleinere maat.

3. Centreer de tepel in de tunnel van het borstschild. Begin nu met kolven en controleer de volgende punten:

JA NEE	Vraag
	Beweegt uw tepel vrij in de tunnel?
	Wordt er geen of slechts heel weinig weefsel van de tepelhof in de tunnel van het borstschild getrokken?
	Herkent u de zachte, ritmische bewegingen in de borst bij elke kolfcyclus?
	Voelt u dat uw borst overal leegloopt?
	Is uw tepel pijnvrij?
	Zit er nog ruimte tussen het puntje van je tepel en het uiteinde van de tepelschacht tijdens het kolven?

Alle antwoorden moeten **JA** zijn en dat geeft aan dat u de juiste maat borstschild en de juiste zuigkracht van de motor hebt. Als dat NIET het geval is, raadpleeg dan uw lactatiekundige of stop met het gebruik van de producten van Maymom om verder ongemak te voorkomen.

Klantenservice

CS@maymom.com
hÿp://maymom.com/
+1 919 4535168
Maymom, LLC
3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703





FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepsservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409