

Adapter für Muttermilch-Aufbewahrungsbeutel



- ✓ Passt auf die meisten Brusthauben mit weitem Hals (Avent, Spectra S1/S2 Weithalsflansche)
- ✓ Kompatibel mit beliebigen Taschen wie Lansinoh, Nuk
- ✓ Direktes Abpumpen in Aufbewahrungsbeutel
- ✓ Kein Milchverlust durch Umfüllen aus Auffangflaschen in Beutel



Material: Polypropylen (PP), Edelstahl
Hitzebeständig: 110 °C (230 °F)
Haltbarkeit: 15 Jahre
Modell: X029W-2Mts
Herstellungsdatum: 19. Juni 2024



Gebrauchsanweisung

Reinigung (Legen Sie den Adapter NIEMALS in eine Mikrowelle!!)

Vor dem ersten Gebrauch und einmal täglich: Waschen Sie den Adapter mit heißem Wasser und einem milden Reinigungsmittel und spülen Sie ihn anschließend sauber.

Sterilisieren Sie das Produkt 2 Minuten lang in kochendem Wasser.

Nach jedem Gebrauch: Mit heißem Wasser und einem milden Reinigungsmittel waschen und anschließend sauber abspülen.




NIEMALS in die Mikrowelle geben!!

Verwenden (Beachten Sie, dass dieser Adapter nicht für jeden Muttermilchaufbewahrungsbeutel auf dem Markt geeignet ist.)

Schritt 1.

Öffnen Sie den Zip-Verschluss des Beutels.

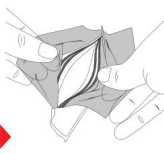


Schritt 2.

Überhängen nach außen klappen.



Schritt 3.

Den Beutel mit den Fingern aufdrehen. Öffnen Sie die Klammern und führen Sie den Trichter des Adapters in den Beutel ein.

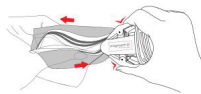


(Berühren Sie aus hygienischen Gründen nicht die Innenseite der Tasche mit den Fingern.)

Schritt 4.

Die Klemmung muss unterhalb der Reißverschlusslinie erfolgen.



Die Klemmung muss unterhalb der Reißverschlusslinie erfolgen.

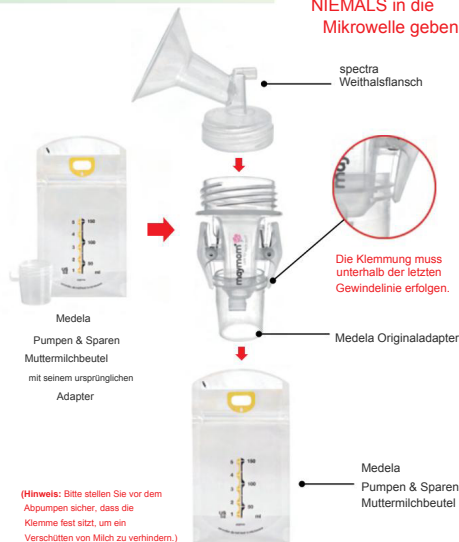

(Hinweis: Bitte stellen Sie vor dem Abpumpen sicher, dass die Klemme fest sitzt, um ein Verschütten von Milch zu verhindern.)

Kompatibilität

✓ Die Länge des Reißverschlusses muss länger als 7,5 cm sein und die Stelle, an der der Reißverschluss verläuft, darf nicht weiter als 2 cm vom oberen Beutelerand entfernt sein.

✓ Die Klemmstelle muss unterhalb der Reißverschlusslinie liegen, um ein Verrutschen der Tasche zu vermeiden.



Bekannte
kompatible
Taschen



Lansinoh



NUK



Medela
Pumpen & Sparen
(Tasche mit Originaladapter)



Bekannte
nicht kompatible
Taschen



Medela
Muttermilchbeutel



Medela
Muttermilchbeutel



AVENT
Muttermilchbeutel

*Avent ist eine eingetragene Marke von Koninklijke Philips NV.
Maymom steht in keiner Verbindung zu Philips und Philips unterstützt das Produkt auch nicht.
*SPECTRA und das SPECTRA-Logo sind eingetragene Marken von Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA und Mtn Byung Wook DBA Uzzimedicare. Maymom ist weder mit ihnen verbunden noch unterstützt sie das Produkt.
*Medela ist eine eingetragene Marke der Medela Holding AG, Schweiz.
Maymom ist weder mit Medela verbunden, noch unterstützt Medela das Produkt.
*Lansinoh ist eine eingetragene Marke von Lansinoh Laboratories, Inc.
Maymom ist weder mit Lansinoh verbunden, noch unterstützt Lansinoh das Produkt.
*NUK ist eine eingetragene Marke der NUK GmbH, Deutschland.
Maymom ist weder mit NUK verbunden, noch unterstützt NUK das Produkt.

Maymom-Kundenservice

CS@maymom.com
<http://maymom.com/>
+1 919 4535168

Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703



Anweisung
Video



2 kg klemmen-
kein Problem



Hergestellt in Taiwan

NIEMALS in die Mikrowelle geben!!

Edelstahlfeder im Inneren.

Reinigen oder
sterilisieren Sie
diesen Milchbeuteladapter
NICHT in einer Mikrowelle
oder einem Dampfbeutel.
Bei hohen Temperaturen
schmilzt der
Edelstahlteil das
Produkt.



**NIEMALS in die
Mikrowelle geben!!**



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409