

Zawór dziobowy

Pasuje do szerokich/standardowych
lejków Medela, Hygeia, Spectra,
Freemie Open System Retired i lejków
Maymom

Informacje o dziobie kaczki



- Po zakończeniu pompowania końcówki zaworu dziobowego mogą się lekko otworzyć. Jednak otwór będzie się stopniowo zamykał. Nie jest to wada, ponieważ zawór jest wykonany z elastycznego materiału. Podczas pompowania końcówki są rozciągane, aby umożliwić przepływ mleka. Gdy przestajesz pompować, końcówki nie są rozciągane, a otwór po chwili się zamknie.
- Gdy zawór nie jest używany, na końcu może być widoczny niewielki otwór.
- Ten produkt podlega zużyciu. Aby uzyskać optymalną wydajność, jeśli końcówki dzioba kaczki nie są używane, ale mają szczelinę większą niż 0,5 mm, należy wymienić je na nowe.

Obsługa klienta

Maymom LLC 3
Laurel Leaf CT, Durham, Karolina Północna

✉ 27703 CS@maymom.com
☎ +1 919 4535168
🏠 <http://maymom.com>

Wyprodukowano na Tajwanie

Informacje o produkcie

Model S005-6D. H005-4fD. X117-4Rr2fD. X029W-2Mba2fD
Tworzywo Czysty silikon
Odporny na ciepło 120°C (250°F)
Czas gwarancji do spójności 5 lat (z dala od bezpośredniego światła słonecznego)
Data produkcji 19 SIERNIA 2024



*SPECTRA i logo SPECTRA są zarejestrowanymi znakami towarowymi Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA i Min Dyang Wook DBA Ustrimedicare. Maymom nie jest powiązana z nie popierając ani nie popierając produktów, ani ich kompatybilności.

*Medela jest zarejestrowanym znakiem towarowym Medela Holding AG, Szwajcaria. Maymom nie jest powiązana z Medela, ani Medela nie popiera produktu i oświadczeń dotyczących zgodności.

*Freemie jest zarejestrowanym znakiem towarowym Dao Health. Maymom nie jest powiązana z Dao Health, ani Dao Health nie popiera produktu i oświadczeń dotyczących zgodności.

*Hygeia jest zarejestrowanym znakiem towarowym Hygeia Inc. Maymom nie jest powiązana z Hygeia.



Mała część się dławi



Używanie dzioba kaczki



silikon
zawór


Funkcja projektowa Maymom

Zaprojektowaliśmy końcówki dzioba kaczki tak, aby miały różną grubość u podstawy i w obszarze końcówki. Grubsza podstawa zapewnia trwałość podczas instalacji i usuwania. Cieńsza końcówka zapewnia lepszy przepływ mleka i lepsze ssanie podczas pompowania.

Używać

Instalacja

- Zamontuj zawór **symetrycznie** na kołnierzu.
- Jeśli zauważysz dużą przerwę, naciśnij krawędź zaworu, aż przerwa będzie mniejsza niż 0,5 mm.

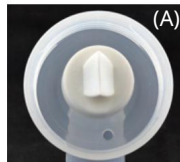

Usuwanie

- Przytrzymaj dwa płaskie boki dzioba kaczki **przy podstawie** i pociągnij na bok.
- NIE ciągnij za cienie końcówki**





spektrum
szerokie/standardowe
szyja



Harmonia
Medela



Medela
Majowa mama
Higieja



Wolny
Podstawa zaworu
(Wycofany system otwarty)



Dopasowanie osobiste
Złącze




maym
szerokie usta
Złącze

P1. Czy dziób kaczkę się rozchyła/opada?

Tłuszcz z mleka matki sprawi, że dziób kaczkę i wnętrze kołnierza będą śliskie i odpadną. Po każdym użyciu należy umyć dziób kaczkę i

kołnierze gorącą wodą z mydłem i osusz je. W razie potrzeby ocet kuchenny pomoże rozpuścić tłuszcz.

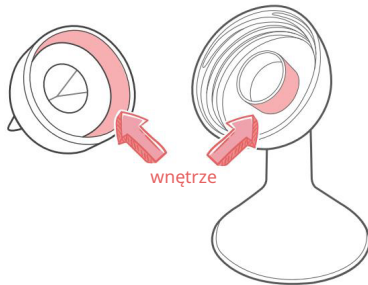


P2. Słabe ssanie?

Sprawdź czubek dzioba kaczkę pod kątem zużycia i uszkodzeń. Wymień w razie potrzeby. Sprawdź, czy między wewnętrznymi końcami dziobów kaczek nie ma resztek mleka.




P3. Szczelina między wargami?

Nie jest to wadliwe, gdy widzisz małą szczelinę między wargami zaworu. Gdy pompa wytworzy ssanie, szczelina się zamknie, a zawory będą działać prawidłowo.

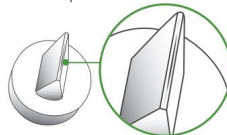

Mała przerwa.
Brak utraty ssania.

- BRAK mycia w zmywarce.
- Przed pierwszym użyciem należy je zdezynfekować wrzącą wodą przez 3 minuty lub parą wodną przez 15 minut.
- Po każdym użyciu delikatnie umyć zawory ręcznie w gorącej wodzie z mydłem. Płucz przez 10-15 sek.
- Po każdym użyciu należy jak najszybciej odkręcić, umyć ręcznie i wysuszyć zawory, aby zapobiec rozwojowi pleśni.

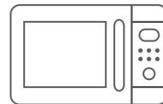

Bezpieczne do użycia w kuchence mikrofalowej



Upewnij się, że w garnku jest dużo wody.



Brzeg garnka bez wody będzie się przegrzewał i stopi plastik.

Zabezpieczenie przed cofaniem się przepływu

Montaż produktu
Wideo

Kompatybilna pompa



Spectra 9+

widmo S2


widmo S1

Połączenie kołnierzowe

widmo

WS

Majowa mama

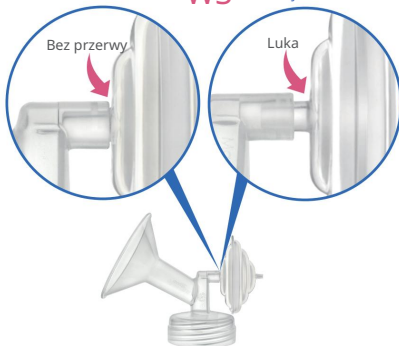


Szczelina nie jest wadą. Złącze kołnierzowe Maymom jest dwufunkcyjne.

Łączy się z 1.

Ochronnikiem przepływu zwrotnego Spectra
2. Rurka do pompowania Medela w stylu

Instalacja i usuwanie

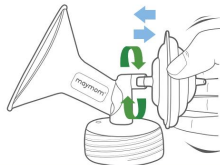Obróć zawór zwrotny, aby
włożyć/wyjąć go z kołnierza**NIE** ciągnij/pchaj z użyciem siły**NIE** wsuwaj go do końca. Jeśli między kołnierzem
Maymom a osłoną jest szczelina, nie jest to wada.

Czyszczenie

Przed pierwszym użyciem i raz dziennie:

- Rozłóż wszystkie części, umyj je gorącą wodą z mydłem i wypłucz.
- Gotuj części we wrzącej wodzie przez 3 minuty.

Upewnij się, że w garnku jest
dużo wody.Brzeg garnka bez wody ulegnie
przegrzaniu, co
spowoduje stopienie się
plastiku.

Po każdym użyciu:


- Rozmontuj, wyczyść i opłucz części w ciepłej wodzie. Całkowicie wysusz na powietrzu.

Można używać w kuchence mikrofalowej

Możliwość mycia w zmywarce na górnym poziomie


Montaż

- Umieść membranę silikonową w obudowie wewnętrznej. Upewnij się, że ściśle przylega do krawędzi
- Umieść obudowę zewnętrzną na membranie.
- Naciśnij krawędź silikonowej membrany więc jest ona na równi z obudową zewnętrzną i wewnętrzną.

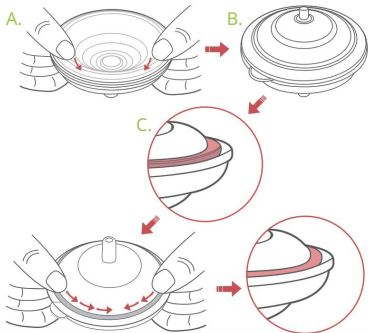

Demontaż


- Przytrzymaj wewnętrzną obudowę jedną ręką.
- Pociągnij za węzeł OPEN na obudowie zewnętrznej, aby rozdzielić 2 części.

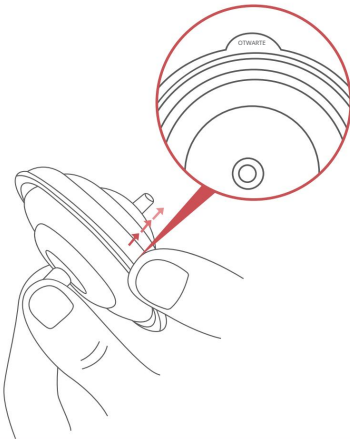


Usuwanie rurek



Poruszaj rurką, aby ją wyjąć.
(Utrzymuje dłuższą żywotność)

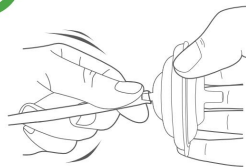

NIE ciągnij za rurkę, aby ją wyjąć

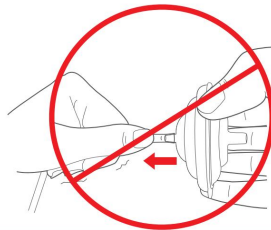

Obsługa klienta



CS@maymom.com



<http://maymom.com/>



+1 919 4535168



Maymom, LLC

3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

maymom
care for each mom

Wyprodukowano na Tajwanie

Informacje o produkcie

Model **X024-2sBfp**

Tworzywo Polipropylen (PP), Silikon

Odporny na ciepło 110OC (230OF)

Okres przydatności do spożycia 5 lat (z dala od bezpośredniego światła słonecznego)

Data produkcji 8 maja 2024 r.




*Medela jest zarejestrowanym znakiem towarowym Medela Holding AG, Szwajcaria. Maymom nie jest powiązana z Medela, ani Medela nie popiera produktu i oświadczeń dotyczących zgodności.

*SPECTRA i logo SPECTRA są zarejestrowanymi znakami towarowymi Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA i Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom nie jest z nimi powiązany ani nie popiera roszczeń dotyczących produktu i zgodności.


Wybuch/opadnięcie dzioba kaczki?

Przed montażem upewnij się, że dwa różowe obszary
NIE mają resztek mleka i są suche, aby uniknąć odpryskiwania
(Szczegóły w instrukcji)

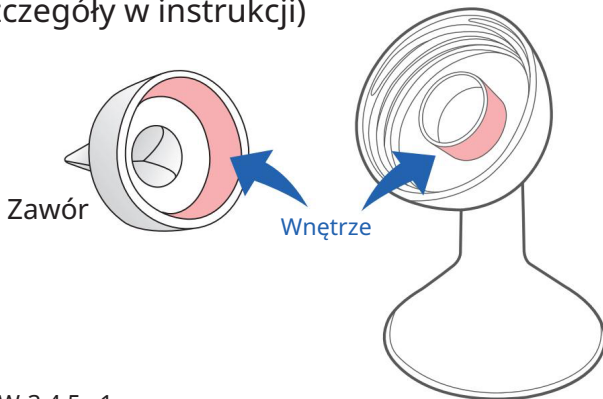


S001W-3.4.5w1

Ostrożność!!!

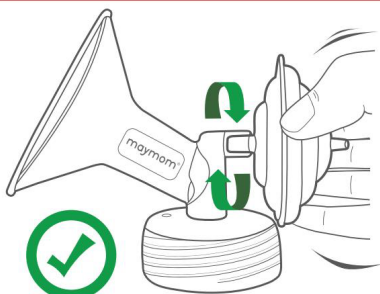

ZAKRĘT

do wkładania/wyjmowania zaworu
zwrotnego do/z kołnierza.

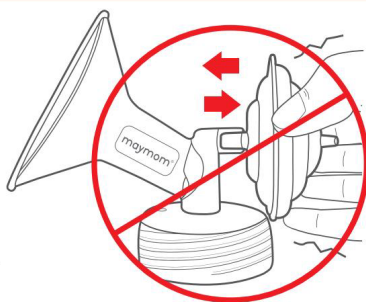

NIE

kołysać, wpychać/wyciągać siłą.
Nastąpi pęknięcie.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409